



固美

**F6 SkyTaper**

无与伦比的柔  
韧新境界



---

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,  
CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®,  
Determinator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®,  
OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®,  
Procodile®, R6 ReziFlow®, TissueMaster®, TMC®,  
TissueMaster Concept® 以及 Visio-Soft® 属于  
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG 的名称和商标。

文中所示的部分产品和名称拥有商标、专利及版权。  
文中未标识 © 特殊标识的部分, 仍受法律保护。


本出版物为本公司版权所有。本公司保留所有版权权利,  
包括翻译、复印和复制 (全部或部分)。未经编者  
书面许可, 不得以任何形式、任何方式, 以电子媒介形式  
复制或加 (复印、微缩胶卷或其他方法) 本出版物的  
任何部分。

产品颜色和产品本身可能会有修改,  
可能出现印刷错误。

2019年11月编制

# 锥度更大、 潜力无穷

- 使用统一的.06锥度进行旋转预备
- 全系列5种规格根管锉满足所有类型根管预备使用
- 凭借其智能设计全系列5种规格根管锉满足所有类型根管预备使用
- 一次性无菌包装无需再次消毒及清洗

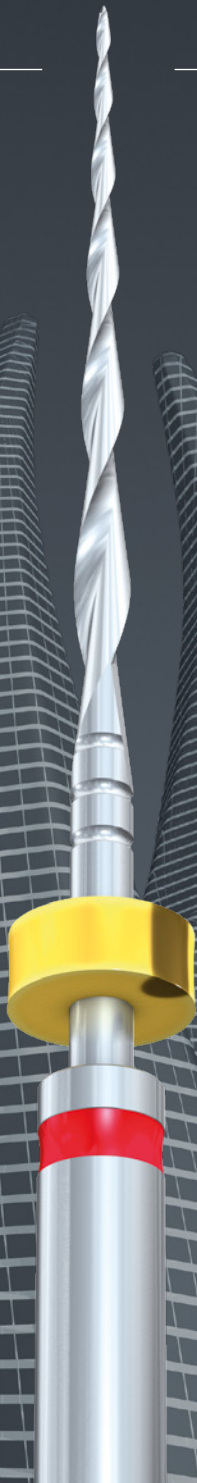


# 灵活性不折不扣

## 灵活的系统和应用

- 综合全面的系统：镍钛根管锉包括5种不同尺寸和3种长度，适用于各种根管解剖结构
- 得益于.06的锥度，充填更方便不受限制
- 适用于各种根管马达及其配弯机上采用传统旋转预备方式使用

## 高效、灵活的根管锉设计

- 一支根管
- 高效的双S形横截面，便于彻底清洁
- 为根管治疗过程提供完善的保护

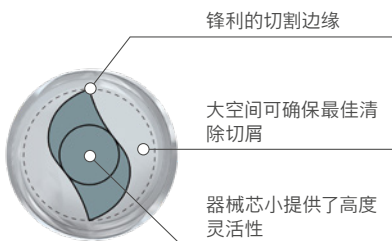


根管锉的横截面



[ 01 ] 根管口扩大预备，如使用开口锉器 OP10L19。

[ 02 ] 例如使用尺寸为015的K型锉创建光滑通道。

根据之前使用的(手动)根管锉选择适用的F6 SkyTaper根管锉。  
规则：跳过一个ISO根管锉尺寸来高效、灵活的选择下一个尺寸的根管锉

[ 03 ] 使用F6 SkyTaper旋根管锉进行根管预备。

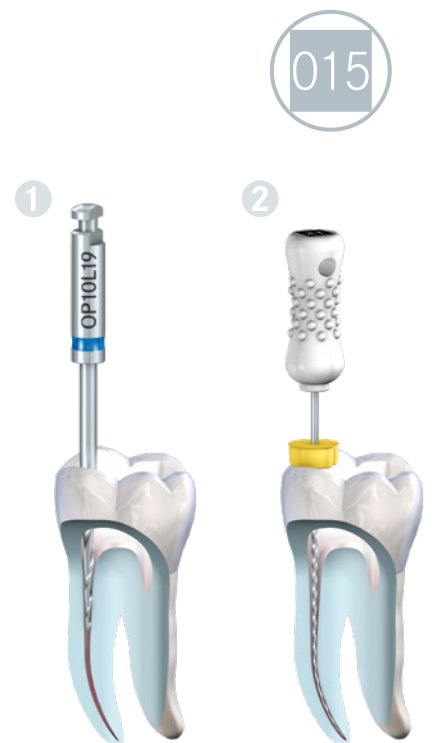

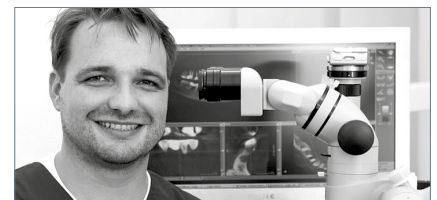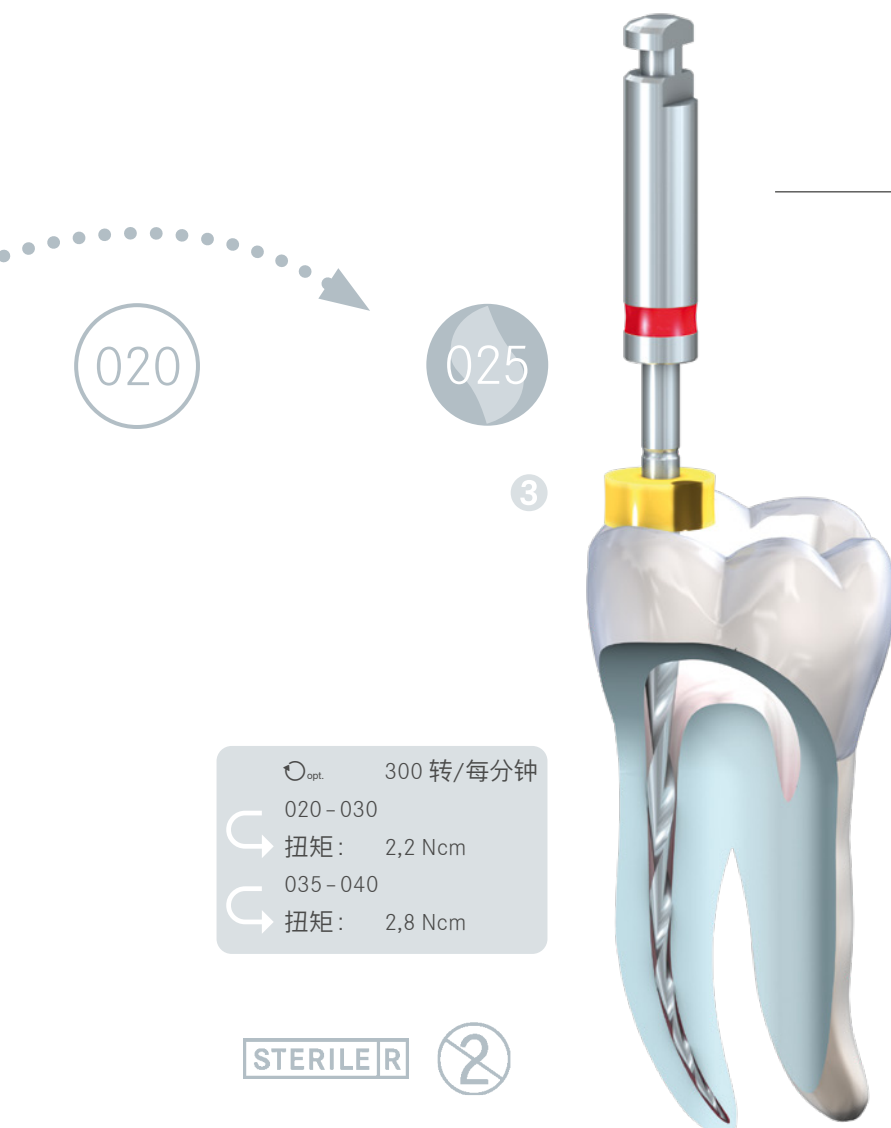

### Günther Stöckl 博士

德国 Rottenburg an der Laaber 的根管治疗专家

“F6 SkyTaper 系列适合普通牙医和专家使用。该系列器械出色的切削性能缩短了预备时间，因此我可用更多时间进行（300 转/每分钟 化学消毒。

6% 的锥度尤其让我印象深刻，它可使根管系统为随后的冷热充填作准备。F6 SkyTaper 系列已成为我日常根管预备工作中必不可少的一部分！”






# F6 SkyTaper。 完美到每一细节



+ 较宽根管的选择

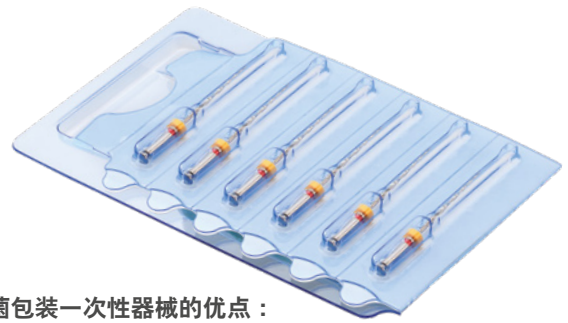

### 无菌包装一次性器械的优点：

- 降低了循环疲劳造成根管锉折断的风险
- 排除了交叉污染的风险
- 无需耗时的再处理(清洗、消毒和灭菌)和记录使用频率。



9938 E-Drive  
根管治疗弯机

用于预备的配件：




● OP10L19.204.030  
开口锉



○ PG03L21/L25.204.015  
PathGlider 通道锉



● PG03L21/L25.204.020  
PathGlider 通道锉

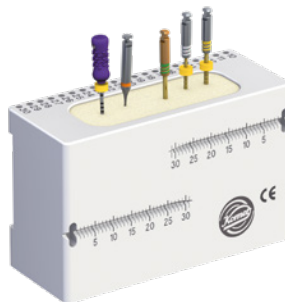

595 临时车针架

用于填充的配件：



9994 F360 充填加热炉



9996 F360 充填器



9995 F360 充填检验器



PPF06 F6 SkyTaper 纸尖

GPF06 F6 SkyTaper 牙胶尖




9978 EasySeal  
基于环氧树脂的根管充填材料

Komet Dental  
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo  
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Export:  
Telefon +49 (0) 5261 701-0  
Telefax +49 (0) 5261 701-329  
export@kometdental.de  
www.kometdental.de

---

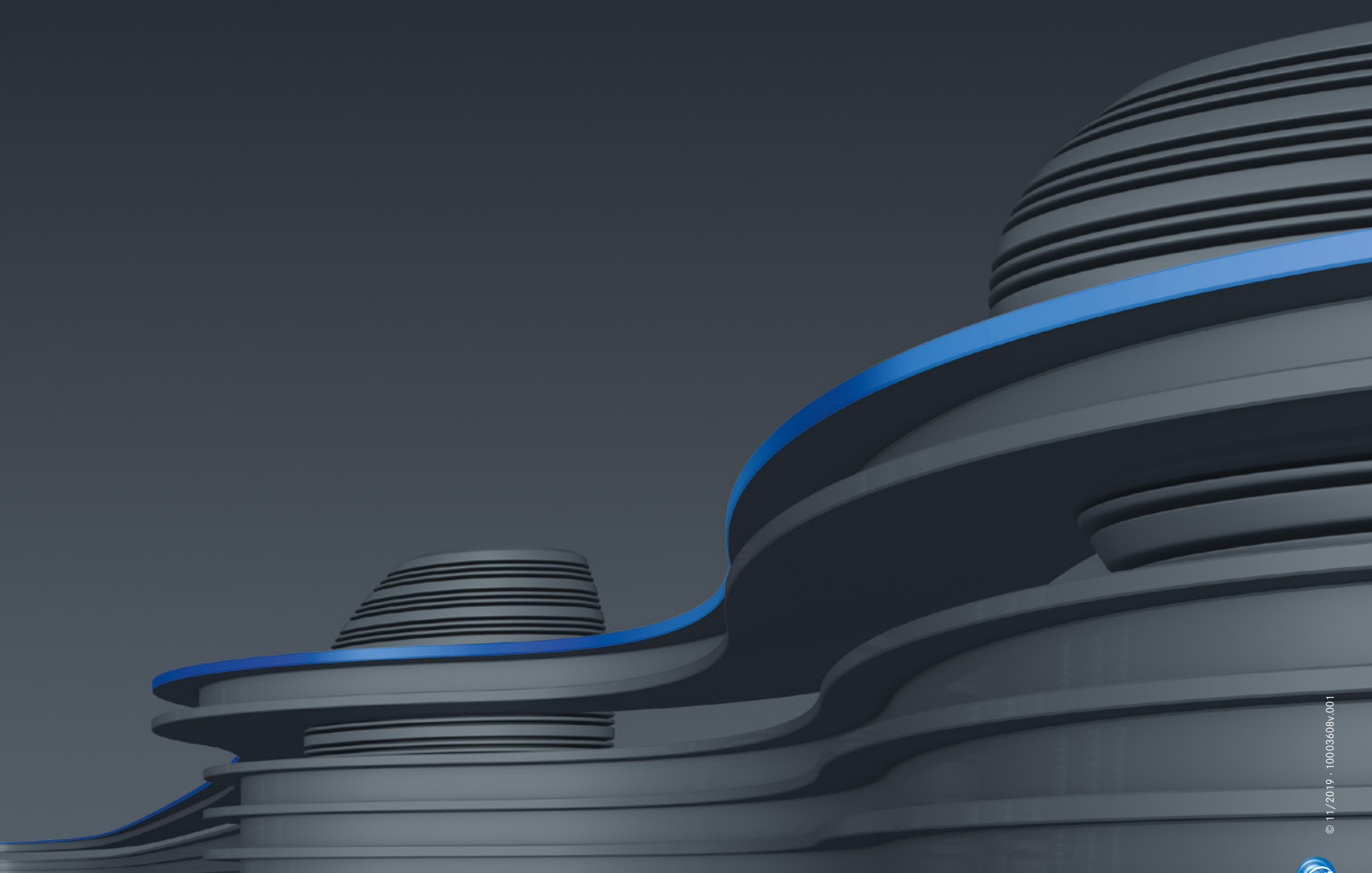

© 11/2019 - 1003686x001

