



Ich bin perfekte Sicht
und Sicherheit.
Ich bin **EndoGuard**.





Stellt die Weichen auf Endo Erfolg.

Der EndoGuard stellt die Weichen bereits zu Beginn der Behandlung auf Endo Erfolg. Das Erstellen einer optimalen Zugangskavität ist der Grundstein einer erfolgreichen endodontischen Behandlung und häufig aufwendiger als die anschließende Wurzelkanal-aufbereitung.

Gleich nach Eröffnung der Pulpakammer eingesetzt, unterstützt Sie der Komet EndoGuard dabei, diesen Schritt besonders effizient und mit höchster Sicherheit durchzuführen.



Optimale Zugangskavität

Nach initialer Öffnung der Pulpakammer wird durch den Abtrag von Dentinüberhängen die Sicht auf die Kavität verbessert und das Auffinden der Wurzelkanäle erleichtert. Der geradlinige Zugang zum Wurzelkanalsystem minimiert die Gefahr einer Kanaltransportation sowie das Risiko einer Feilenfraktur.



Schutz des Pulpakammerbodens

Der EndoGuard ist mit einer glatten, nicht verzahnten Spitze ausgestattet. Hierdurch wird der Pulpakammerboden geschützt und ein exzessiver Abtrag von Zahnhartsubstanz vermieden.




Keine Präparation von Unterschnitten

Aufgrund seiner konischen Form wird die Präparation von Unterschnitten weitestgehend vermieden. Dies stellt sicher, dass kein infiziertes Gewebe im Pulpakavum verbleibt.



Effiziente Querhiebverzahnung

Der Querhieb sorgt für ein besonders effizientes und ruhiges Arbeiten. Dies garantiert die volle Kontrolle über das Instrument. Zu jedem Zeitpunkt.

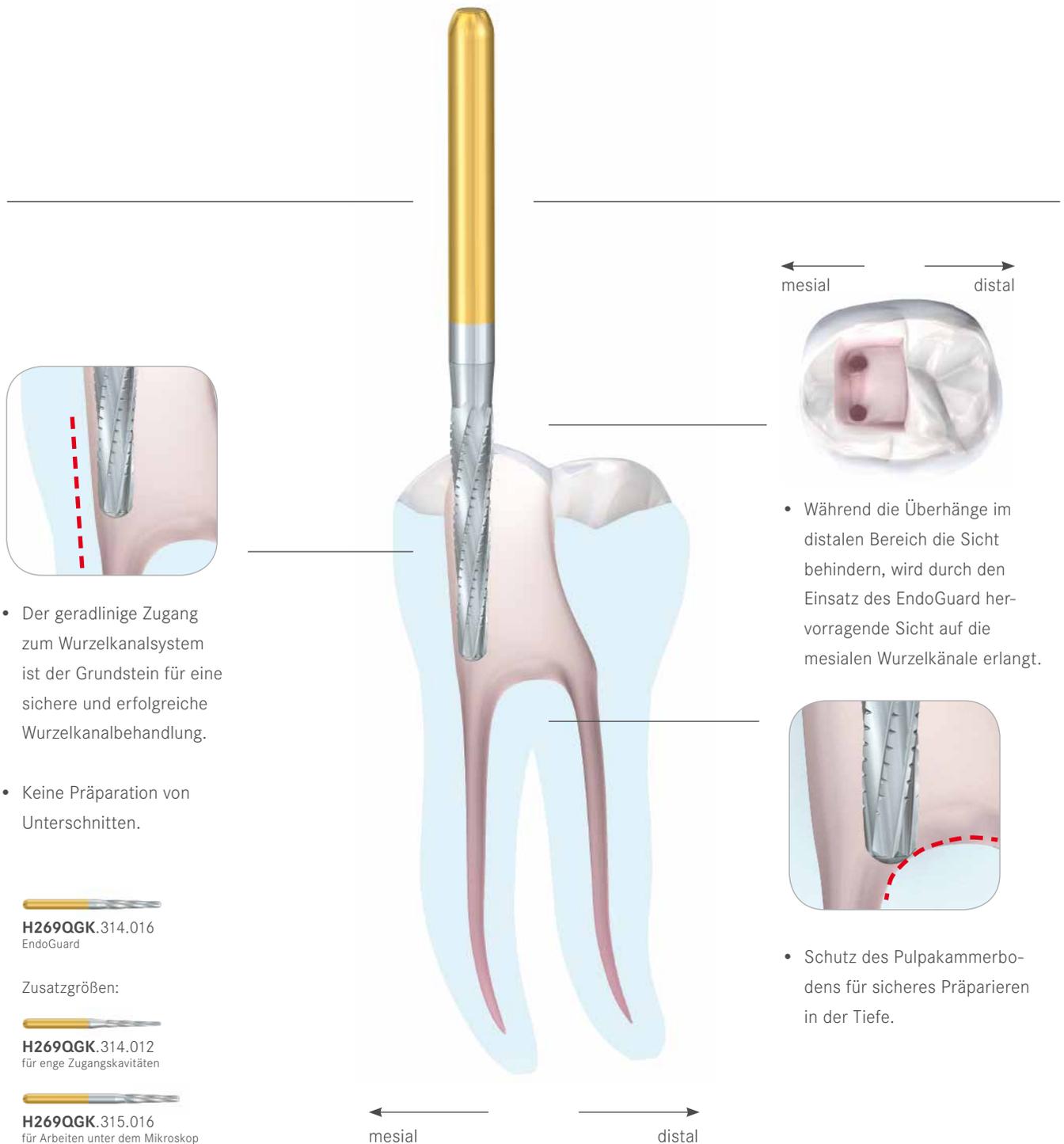

- Der geradlinige Zugang zum Wurzelkanalsystem ist der Grundstein für eine sichere und erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung.

- Keine Präparation von Unterschnitten.


H269QGK.314.016
 EndoGuard

Zusatzgrößen:


H269QGK.314.012
 für enge Zugangskavitäten


H269QGK.315.016
 für Arbeiten unter dem Mikroskop

← mesial → distal →

- Während die Überhänge im distalen Bereich die Sicht behindern, wird durch den Einsatz des EndoGuard hervorragende Sicht auf die mesialen Wurzelkanäle erlangt.



- Schutz des Pulpakammerbodens für sicheres Präparieren in der Tiefe.

← mesial → distal →

⌚_{opt.} 20.000 min⁻¹

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at

Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® und TissueMaster Concept® sind eingetragene Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand: September 2016

