



F6 SkyTaper.
Un nuevo nivel
de flexibilidad.



Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® y TissueMaster Concept® son marcas registradas de Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Los productos y las denominaciones comerciales que figuran en estas páginas se encuentran protegidos en parte por patente o por derecho de autor o de marcas. La ausencia de una nota específica o la no figuración del signo ® no significa que no exista tal protección jurídica.


Esta obra está protegida por derecho de autor. Todos los derechos de divulgación, incluyendo reproducción total o parcial de fotos o textos, reimpresiones o extractos, almacenamiento, recuperación o difusión mediante cualquier sistema, están reservados y requieren de nuestro consentimiento por escrito.

Los colores y los productos están sujetos a alteraciones, exceptuando errores de impresión.

Hecho en septiembre de 2016

Mayor conicidad, más ventajas.

- Preparación del conducto en modo rotativo con un instrumento con conicidad .06.
- 5 tamaños para preparar todas las anatomías de los conductos radiculares.
- Flexibilidad y eficiencia gracias al diseño inteligente de las limas.
- Limas desechables en envase esterilizado.

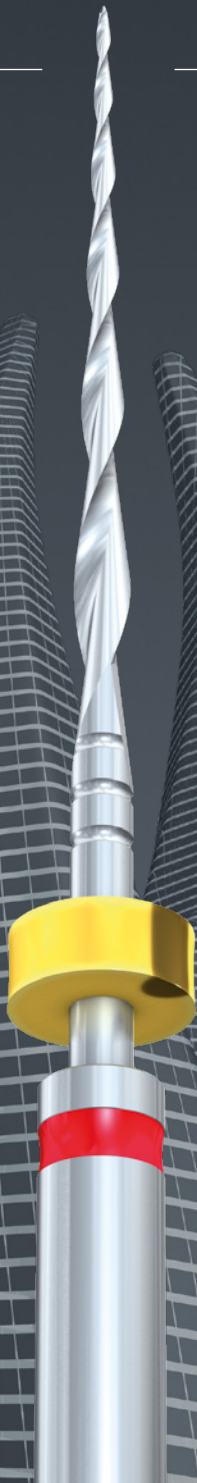


Flexibilidad sin compromisos.

Flexibilidad en la aplicación y en el sistema

- Sistema completo: limas NiTi en cinco tamaños y tres longitudes para cualquier anatomía de conducto radicular.
- Gracias a la conicidad de .06, existe la posibilidad de utilizar cualquier sistema de obturación.
- Utilización con todos los motores y contra-ángulos con limitación del torque.

Un diseño de la lima para una mayor eficiencia y flexibilidad

- Una sola lima para la mayoría de los conductos.
- Perfil transversal en forma de doble S con alta eficacia de corte.
- Excelente preservación de la anatomía del conducto.

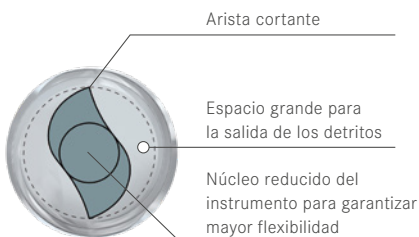

Perfil transversal de la lima

[01] Desobstruir la parte coronal del conducto, p. ej. con el Opener OP10L19.


[02] Crear una vía de deslizamiento, p. ej. con una lima «K» en tamaño 015.

Elegir la lima F6 SkyTaper apropiada, según la lima (manual) utilizada con anterioridad.

Regla:

Saltar un tamaño ISO de la lima.

[03] Preparar el conducto radicular con la lima F6 SkyTaper.

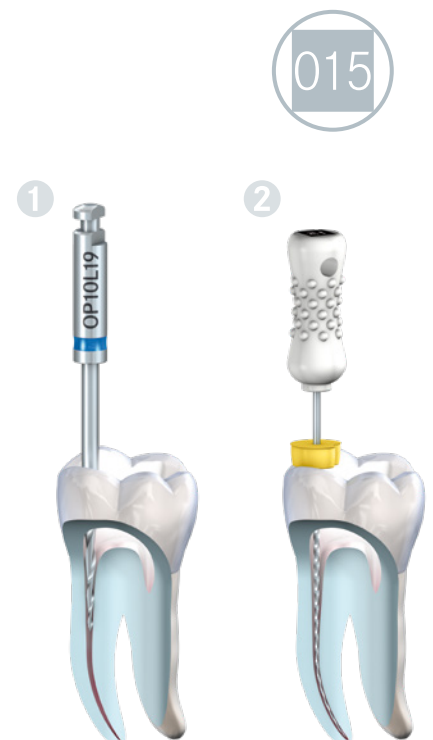

020

025

3

↻ _{opt.}	300 rpm
↶	020 - 030
→	Torque: 2,2 Ncm
↶	035 - 040
→	Torque: 2,8 Ncm

STERILE R



Dr. Günther Stöckl

Especialista en endodoncia
en Rottenburg an der Laaber, Alemania

«F6 SkyTaper es un sistema tanto para odontólogos generales como especialistas. Gracias a la gran capacidad de corte de los instrumentos esto me permite acortar la preparación y dedicar más tiempo a la desinfección química del conducto radicular.

Aprecio particularmente la mayor conicidad de 6% de las limas, ya que puedo preparar el conducto de forma óptima para facilitar la obturación fría o caliente subsiguiente. ¡Ya no quisiera renunciar a este sistema para mis tratamientos endodónticos!»



F6 SkyTaper. Perfección con todo lo necesario.



Glide path hasta #010

F06L21/L25/L31.204.020



Glide path hasta #015

F06L21/L25/L31.204.025



Glide path hasta #020

F06L21/L25/L31.204.030




+ Opcional
para conductos anchos



F06L21/L25/L31.204.035



F06L21/L25/L31.204.040

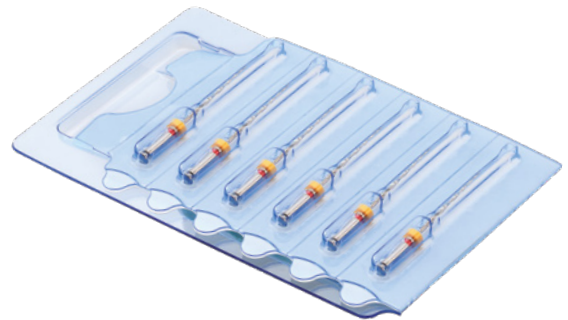

Ventajas de instrumentos de único uso en embalaje estéril:

- Se reduce el riesgo de fracturas a causa de fatiga cíclica.
- Se excluye el riesgo de contaminación cruzada.
- No es necesario limpiar, desinfectar y esterilizar los instrumentos, ni documentar y controlar la cantidad de usos.



9938 E-Drive
Contra-ángulo endodóntico

Accesorios para el tratamiento:




● **OP10L19.204.030**
Opener



○ **PG03L21/L25/L31.204.015**
PathGlider



● **PG03L21/L25/L31.204.020**
PathGlider

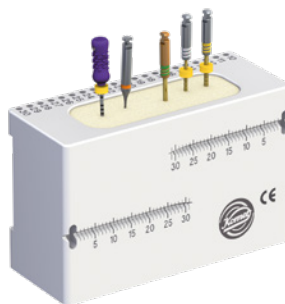

595 Fresa para la limpieza intermedia

Accesorios para la obturación:



9994 Horno F360 Fill



9996 Obturadores F360 Fill



9995 Verificadores F360 Fill



PPF06 Puntas de papel F6 SkyTaper

GPF06 Conos de gutapercha F6 SkyTaper



9978 EasySeal
Material de obturación radicular
a base de resina epoxi

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:
Telefon +49 (0) 5261 701-700
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Export:
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.de
