



**BlueTip.**

Istruzioni per l'uso  
passo dopo passo.




[ 01 ] Avvitare manualmente la punta di attivazione BlueTip nella filettatura del manipolo sonico in senso orario fino a percepire un leggero aumento della resistenza all'inserimento. Durante questa operazione, assicurarsi di:

- non piegare la punta di attivazione
- non deformarla.



[ 02 ] Riempire la camera pulpare con una delle seguenti soluzioni irriganti:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Soluzione di NaOCl            | max. 5,25% |
| EDTA                          | max. 17%   |
| Acido citrico                 | max. 10%   |
| H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | max. 3%    |
| CHX                           | max. 2%    |

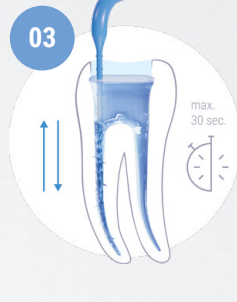

[ 03 ] Inserire la punta di attivazione nel canale radicolare e attivare il manipolo sonico per un massimo di 30 secondi, secondo necessità, muovendo la punta di attivazione verso l'alto e verso il basso senza esercitare pressione.

### Importante:


La frequenza del manipolo sonico deve essere impostata al livello di potenza massimo, senza superare il limite di 6.000 Hz

**(alimentazione dell'aria a massimo 0,3 MPa (3 bar)).**


Attivare la punta di irrigazione esclusivamente quando si trova all'interno del canale radicolare.

La punta di irrigazione è un prodotto sterile monouso. È destinata esclusivamente all'utilizzo su un singolo paziente. La punta di irrigazione non può essere disinfettata né sterilizzata in autoclave.


Il riutilizzo della punta di irrigazione aumenta il rischio di rottura spontanea della punta stessa e può causare contaminazioni crociate.

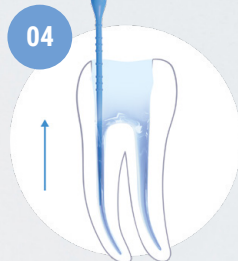

[ 04 ] Dopo ogni fase di preparazione, ripetere l'irrigazione e l'attivazione con la punta di attivazione.

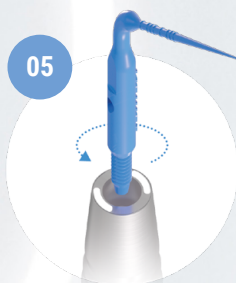

[ 05 ] Al termine dell'utilizzo: svitare manualmente la punta di attivazione dal manipolo sonico ruotandola in senso antiorario.

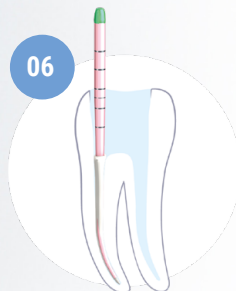

[ 06 ] Asciugare il canale e procedere all'otturazione con il metodo preferito, ad esempio con la tecnica del cono singolo utilizzando Komet **BioSeal**.

Per l'irrigazione del canale radicolare utilizzare esclusivamente soluzioni irriganti comunemente reperibili in commercio e destinate a questo scopo:


|                               |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Soluzione di NaOCl            | ..... | max. 5,25% |
| EDTA                          | ..... | max. 17%   |
| Acido citrico                 | ..... | max. 10%   |
| H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | ..... | max. 3%    |
| CHX                           | ..... | max. 2%    |

### Informazioni utili:

Manipoli sonici compatibili:

Komet SF1LM / SF1LS, W&H ZA-55, NSK

Ti-Max 970, KaVo SONICflex 2003

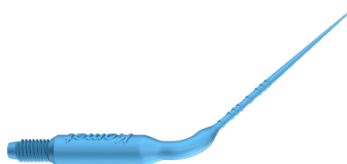

SFPA66.000.020

STERILE



**Komet Dental**

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo  
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany  
Phone +49 (0) 5261 701-0  
hello@kometdental.com

**Komet Germany**

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo  
Phone +49 (0) 800 7701-700  
Fax +49 (0) 800 7701-800  
info@kometdental.de  
www.kometdental.de

**Komet Austria**

Komet Austria Handelsagentur GmbH  
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg  
Phone +43 (0) 0800 70170070  
Fax +43 (0) 662 829-435  
info@kometdental.at  
www.kometdental.at

**Komet France**

SA à conseil d'administration, s.a.i.  
18 rue · Fourcroy · 75017 Paris  
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90  
info@komet.fr  
www.komet.fr

**Komet UK**

Komet Dental Instruments UK Limited  
Unit 8 Arden House · Marsh Lane  
Hampton In Arden · B92 0AJ  
Phone +44 (0) 2046 200580  
info@kometuk.com  
www.kometuk.com

**Komet International Distribution**

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo  
Phone +49 (0) 5261 701-0  
export@kometdental.de  
www.kometdental.com

**Komet Italy**

Komet Italy S.r.l.  
Via Gianbattista Morgagni 36,  
37135 Verona  
Phone +39 (0) 45 11171911  
info@komet.it  
www.komet.it

**Sede operativa:**

Via Gianbattista Morgagni, 36  
37135 Verona (VR)  
T 045 11171911  
www.komet.it | info@komet.it

**Sede legale:**

Via Cernaia 11  
20121 Milano (MI)  
T 02 67076654

**Centro corsi Komet Academy Italia:**

Via Belgio, 12  
37135 Verona (VR)  
T 045 11171911  
www.komet.it | corsi@komet.it

