



BlueTip.

Wskazówki dotyczące
stosowania
krok po kroku.





[01] Wkręcać ręcznie końcówkę aktywacyjną BlueTip zgodnie z ruchem wskazówek zegara w gwint rękojeści sonicznej do momentu, gdy opór przy wprowadzaniu nieznacznie wzrośnie. Należy uważać, aby końcówki aktywacyjnej przy tym

- nie wygiąć
- nie złamać.



[02] Wypełnić komorę miazgi jednym z poniższych rozwiązań płuczących:

roztwór NaOCl	maks. 5,25%
EDTA	maks. 17%
kwas cytrynowy	maks. 10%
H ₂ O ₂	maks. 3%
CHX	maks. 2%



[03] Wprowadzić końcówkę aktywującą do kanału korzeniowego i włączyć rękojeść soniczną w zależności od potrzeb na maksymalnie 30 sekund, poruszając końcówką aktywującą w górę i w dół bez wywierania nacisku.


Ważne:

Częstotliwość rękojeści sonicznej musi być ustawiona na najwyższy poziom mocy, przy czym nie można przekroczyć górnej granicy wynoszącej 6000 Hz


(dopływ powietrza przy maksymalnej wartości 0,3 Mpa (3 bar)).

Kończówkę do płukania należy aktywować tylko wtedy, gdy znajduje się ona w kanale korzeniowym.


Kończówka do płukania to sterylny produkt jednorazowego użytku. Jest ona przeznaczona wyłącznie do zastosowania u jednego pacjenta. Kończówki do płukania nie można poddawać dezynfekcji ani sterylizacji w autoklawie. Ponowne zastosowanie końcówki do płukania zwiększa ryzyko spontanicznych pęknięć końcówki do płukania i może doprowadzić do skażenia krzyżowego.

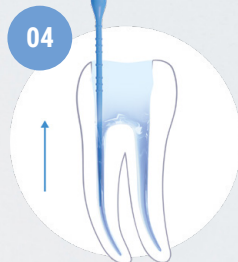

[04] Po każdym etapie preparacji należy powtórzyć płukanie i aktywację przy użyciu końcówki aktywującej.

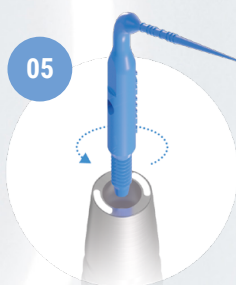

[05] Po zakończeniu stosowania: Odkręcić ręcznie końcówkę aktywacyjną z rękojeści sonicznej, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

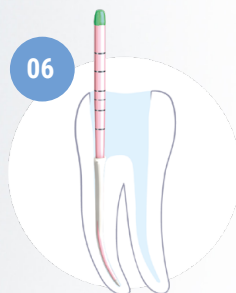


[06] Osuszyć kanał i wykonać obturację preferowaną metodą, np. techniką 1 ćwieka przy użyciu Komet **BioSeal**.

Do płukania kanału korzeniowego należy używać wyłącznie dostępnych na rynku roztworów do płukania przeznaczonych do tego celu:

roztwór NaOCl	maks. 5,25%
EDTA	maks. 17%
kwasek cytrynowy	maks. 10%
H ₂ O ₂	maks. 3%
CHX	maks. 2%

Przydatne informacje:

kompatybilne rękojeści soniczne:
Komet SF1LM / SF1LS, W&H ZA-55, NSK
Ti-Max 970, KaVo SONICflex 2003

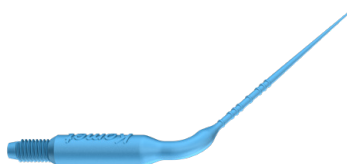

SFPA66.000.020

STERILE R



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany
Phone +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com

Komet Germany

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 800 7701-700
Fax +49 (0) 800 7701-800
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Komet Austria

Komet Austria Handelsagentur GmbH
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Phone +43 (0) 0800 70170070
Fax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

SA à conseil d'administration, s.a.i.
18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Komet Italy S.r.l.
Via Gianbattista Morgagni 36,
37 135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Komet Dental Instruments UK Limited
Unit 8 Arden House · Marsh Lane
Hampton In Arden · B92 0AJ
Phone +44 (0) 2046 200580
info@kometuk.com
www.kometuk.com

Komet International Distribution

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 5261 701-0
export@kometdental.de
www.kometdental.com

