

Procodile.
Agil, insaciable
y muy eficiente.





Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIAO®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, KometBioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q® y SHAX® son marcas registradas de Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® y EndoPilot® son marcas registradas de Schlumbohm GmbH & Co. KG

Los productos y las denominaciones comerciales que figuran en estas páginas se encuentran protegidos en parte por patente o por derecho de autor o de marcas. La ausencia de una nota específica o la no figuración del signo ® no significa que no exista tal protección jurídica.

Esta obra está protegida por derecho de autor. Todos los derechos de divulgación, incluyendo reproducción total o parcial de fotos o textos, reimpresiones o extractos, almacenamiento, recuperación o difusión mediante cualquier sistema, están reservados y requieren de nuestro consentimiento por escrito.

Los colores y los productos están sujetos a alteraciones, exceptuando errores de impresión.

Hecho en 06/2022


Muy cortante ¡por naturaleza!

• Óptima preparación también de conductos curvados
gracias al núcleo con conicidad variable

• Remoción de sustancia rápida y eficaz
gracias a los espacios más grandes para la salida de las virutas

• Mayor seguridad para el paciente
gracias a la excelente resistencia a la fatiga cíclica

• Apropiado para el uso en cualquier motor con acción hacia la izquierda de uso corriente
o en el motor EndoPilot® con movimiento patentado ReFlex®

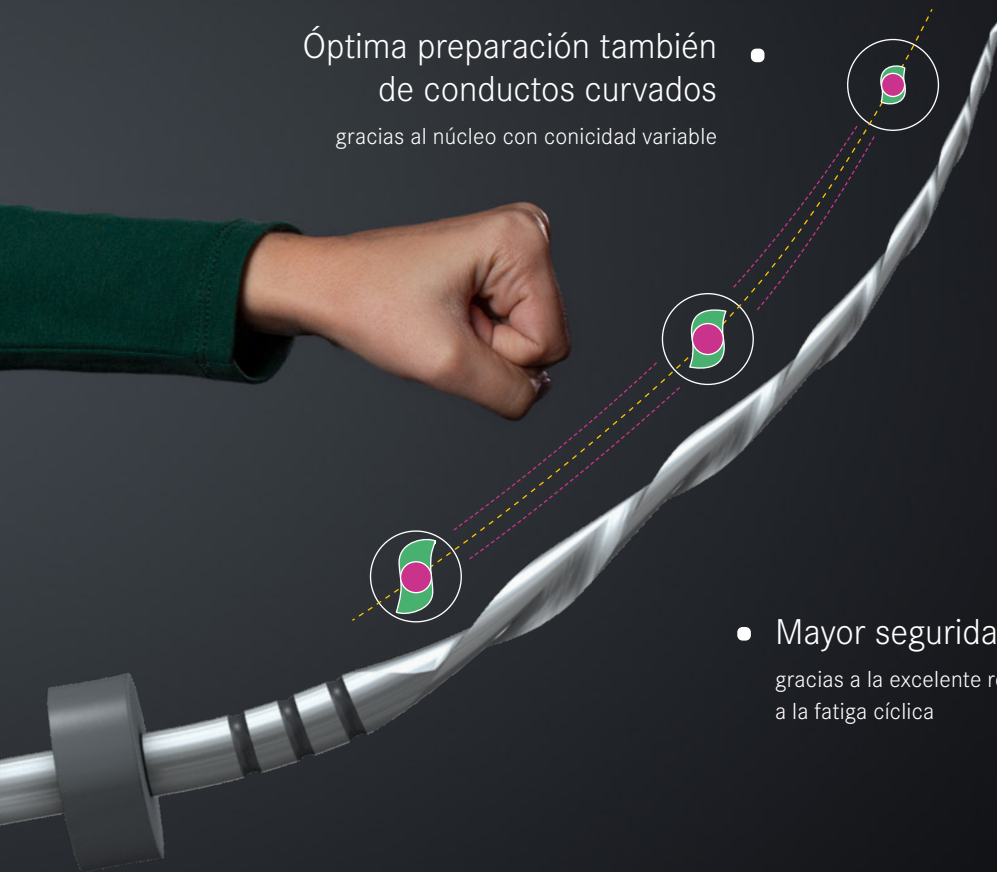

Lima con núcleo innovador.



Con un diseño de lima completamente revisado, Procodile es una especie totalmente nueva en el imperio de preparaciones radiculares. Gracias al núcleo innovador con conicidad variable, Procodile es notablemente más eficiente y flexible, por lo que es ideal para dar forma al conducto y lograr una preparación excelente del conducto. Procodile puede distinguirse fácilmente de todas las demás limas por el aro identificador de color verde de su vástago.

Insaciable: **Remoción de sustancia rápida y eficiente.**

Con su núcleo innovador con conicidad variable, la lima Procodile dispone de unos espacios para la evacuación de los detritos ampliados hasta en un 12 %*, resultando en una remoción aún más eficiente del tejido infectado del conducto y un tiempo de preparación optimizado.


Flexible: **Óptima preparación hasta de conductos curvos.**

Gracias al diseño genial de la lima con un núcleo con conicidad variable y un perfil transversal en forma de doble S, Procodile se distingue por una flexibilidad mejorada de hasta el 44 %*, facilitando así una preparación segura sin alteración indeseada de la forma del conducto.

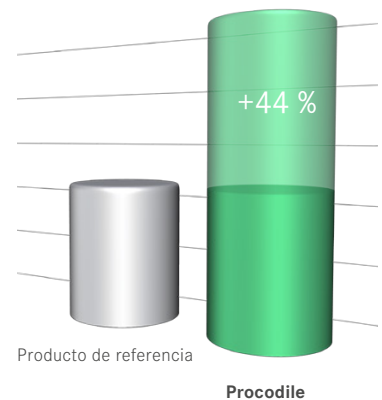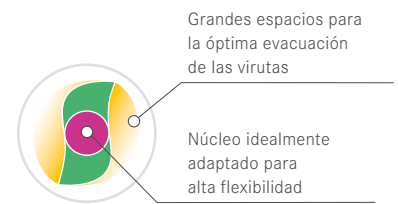

Flexibilidad mejorada
Procodile en comparación con R6 ReziFow. Los resultados se basan en investigaciones internas. Los datos correspondientes están disponibles.

*) en comparación con los instrumentos R6 ReziFlow

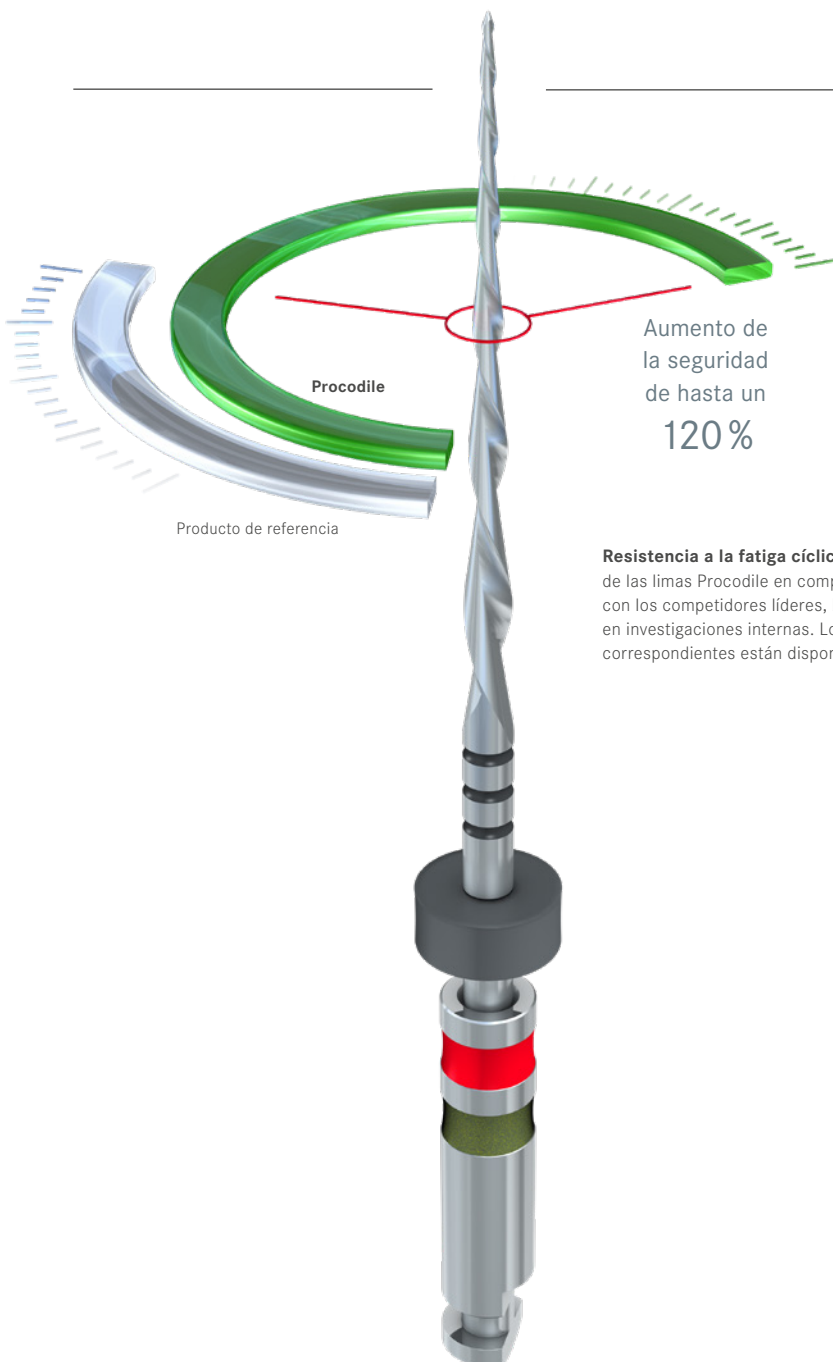

Aumento de la seguridad de hasta un **120 %**

Resistencia a la fatiga cíclica de las limas Procodile en comparación con los competidores líderes, basando en investigaciones internas. Los datos correspondientes están disponibles.

Resistente:

Mayor seguridad para el paciente.

La resistencia a la fatiga cíclica del sistema Procodile es hasta un 120 % más alta que la de otros sistemas de limas recíprocos, reduciendo así el riesgo de una fractura del instrumento y aumentando la seguridad para el paciente. Además, los instrumentos de uso único en embalaje estéril reducen el posible riesgo de contaminación cruzada.
















Innovador:

Un nuevo movimiento inteligente en el EndoPilot.

Concebidas para el uso en cualquier motor recíproco corriente, las limas Procodile aseguran una operación sencilla y segura. El sistema Procodile trabaja en un modo aún más inteligente con ReFlex®, el nuevo movimiento patentado en el EndoPilot. Este movimiento une las ventajas de una operación rotatoria y recíproca para facilitar el uso en conductos radiculares con anatomías simples y más complejas.


Paso a paso.


Para facilitar la selección del instrumento apropiado, el sistema Procodile manejable comprende 4 tamaños principales para conductos estrechos, medios y largos. Las puntas de papel y de gutapercha a juego garantizan una óptima obturación.

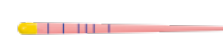
	Opción para conductos estrechos				
	● PROC6L25.204.020		● PPPR06.000.020		● GPPR06.000.020
	● PROC6L25.204.025		● PPPR06.000.025		● GPPR06.000.025
	Opción para conductos medios				
	● PROC5L25.204.040		● PPPR05.000.040		● GPPR05.000.040
	Opción para conductos largos				
	● PROC4L25.204.050		● PPPR04.000.050		● GPPR04.000.050






 [01] Preparación generosa de la entrada al conducto, conveniente con el Opener recíproco OPR08L19.

 [02] Creación de una vía de deslizamiento «glide path», p. ej. con una lima «K» en tamaño 015. Selección de una lima Procodile apropiada en función del tamaño de la última lima (manual) utilizada.
Regla: Saltar un tamaño ISO de la lima.

 [03] Preparación del conducto con la lima Procodile.

 [04] Obturación con una punta de gutapercha apropiada.

STERILE R

2



Procodile. El sistema.

Procodile limas

con conicidad adaptada .06



●● PROC6L25.204.020



●● PROC6L25.204.025



●● PROC6L25.204.030

Procodile limas

con conicidad adaptada .05



●● PROC5L25.204.035



●● PROC5L25.204.040

Procodile limas

con conicidad adaptada .04



○● PROC4L25.204.045



●● PROC4L25.204.050



Procodile Puntas de papel

PPPR06.000.S1

Contenido: 30x 025, 10x 030, 10x 035, 10x 040

●● PPPR06.000.020

●● PPPR06.000.025

●● PPPR06.000.030

●● PPPR05.000.035

●● PPPR05.000.040

○● PPPR04.000.045

●● PPPR04.000.050

Procodile Puntas de gutapercha

GPPR06.000.S1

Contenido: 30x 025, 10x 030, 10x 035, 10x 040

●● GPPR06.000.020

●● GPPR06.000.025

●● GPPR06.000.030

●● GPPR05.000.035

●● GPPR05.000.040

○● GPPR04.000.045

●● GPPR04.000.050



Disponible en las longitudes 21 mm, 25 mm y 31 mm [cada blister contiene 6 limas].

PPSPR06 Procodile Puntas de papel

en envases blíster estériles

Contenido: 120x 025, 20x 030, 20x 035, 40x 040

Procodile. Los accesorios.

 **OPR10L19.204.030**
Opener recíproco

 **OPR08L19.204.025**
Opener recíproco



BCS1 KometBioSeal
Sellador endodóntico biocerámico



EP0014 EndoPilot
(EPDP - DownPack/EPBF - BackFill)

EndoPilot – ahora con movimiento inteligente ReFlex®.

Concebidas para el uso en cualquier motor recíproco corriente, las limas Procodile aseguran una operación sencilla y segura. El sistema Procodile trabaja en un modo aún más inteligente con ReFlex®, el nuevo movimiento patentado en el EndoPilot. Este movimiento une las ventajas de una operación rotatoria y recíproca para facilitar el uso en conductos radiculares con anatomías simples y más complejas.

Procodile.

Curioso e impresionante:

«Recomiendo a mis colegas utilizar este sistema Procodile de Komet. Es un sistema recíproco para la preparación del conducto radicular sencillo y seguro que facilita mi trabajo diario. El sistema se distingue por una remoción de sustancia muy eficiente a lo largo de toda la longitud del conducto así como por una gran flexibilidad de las limas. Gracias al uso universal de las limas, este sistema asegura una preparación endodóntica de alta calidad»



Dr. Björn Schaper

Dentista de Detmold

«Para mis tratamientos endodónticos deseo disponer de una lima que trabaje efectivamente y que también pueda penetrar con seguridad los conductos estrechos o curvos. Desde el primer tratamiento primario me convenció el modo de funcionar de las limas. No demasiado agresivo pero muy eficiente y al mismo tiempo controlado»



Niels Niemann

Dentista de Munich

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:
Telefon +49 800 7701 700
Telefax +49 800 7701 800
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Export:
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.com



Importador para España y Portugal:

Especialidades Dentales KALMA S.A.
Camino de Hormigueras, 118
28031 Madrid (España)

Tf. (34) 91 380 23 83
kalma@kalma.es
www.kalma.es