


PiezoLine

Détartrage/Paro | A, P, PS, PL3.EM1



|| max. 2 mm

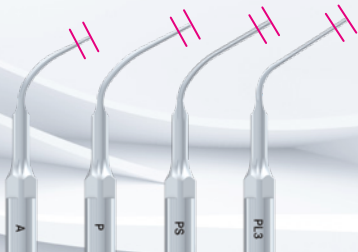

Niveau de puissance Piezon® & Titanus®*

Indication

		faible	moyen	élevé
Détartrage	A			
	P			
	PS			
Prophylaxie implantaire	SF1982			
Paro	PL1 – PL3			

*Piezon® est une marque déposée de la société EMS, Suisse · Titanus® est une marque déposée de la société TEKNE DENTAL, Italie

Remarque : débit du spray minimum (50 ml/min.)

 permis

 seulement permis pendant une courte période

 inapproprié/interdit