


SonicLine

Skalery/Perio | SF1-8



== maks. 2 mm

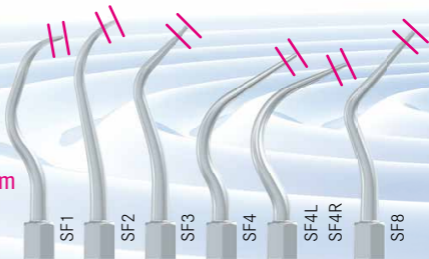

Wskazania

Poziom mocy SF1LM/S

	1	2	3	
Skalery	1	2	3	
Profilaktyka w leczeniu implantologicznym	1	2	●	
Periodontologia	1	2	3	
Preparacja zęba pod koronę, Stripping/Shaping	1	●	●	
Preparacja ubytku, wkłady	1	●	3	
Licówki, Mikropreparacja/Zukośnienie	1	●	●	
Opracowywanie bruzd	1	2	3	
Endodoncja*	1	2	●	
Chirurgia**	1	2	●	

Uwaga: *SF65, **SFS103-105 dozwolony wyłącznie poziom 1.

**SFS100/101/102/109 także poziom 3.

- dozwolony
- dozwolony wyłącznie krótkookresowo
- niedozwolony