




Endo ReStart.

Nová éra v endodontickém ošetřování.

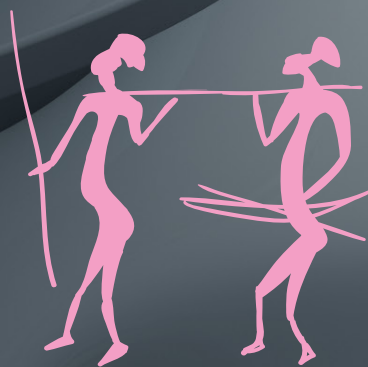

Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® a TissueMaster Concept® jsou chráněny autorskými právy Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Některé produkty a pojmenování zmíněné v textu jsou označeny obchodní známkou, patentované nebo chráněny autorskými právy. Nepřítomnost speciálního znaménka © by nemělo být interpretováno jako absence právní ochrany.

Tato publikace je chráněna autorskými právy. Všechny práva, překlad, tisk a rozmnožování (dokonce i formou výtahu), jsou vyhrazena. Žádná část této brožury nesmí být přepracována za použití elektronických médií, a to v žádné formě (fotokopie, mikrofilm, či jiné metody), bez písemného souhlasu editora.

Barvy a produkty jsou předmětem podléhajícím změně. Tiskové chyby vzhazeny.



Endo ReStart předznamenává novou éru v endodoncii.

- Inovativní systém revizního ošetřování kanálků. Vyrobeno z NiklTitanu.
- Speciálně přizpůsobený geometrický tvar ostří s dynamickým zkroucením optimálně odstraní koreňovou výplň.
- Aktivní hrot kontroluje bezpečný přístup do kanálku.
- Kónus .05 pro dokonalé vyvážení stability a flexibility endo nástroje.



Endo ReStart: Ošetření pomocí „dynamické spirály“.




Dokonalé vyvážení.

Endo ReStart je konstantně zúžen tak, aby bylo dosaženo správného vyvážení stability a flexibility. Díky tomu se může přizpůsobit různým tvarům kanálků.



Aktivní hrot.

Tyto endodontické instrumenty disponují bezpečným, ale aktivním hrotem, který umožňuje, s naprostou lehkostí, pronikat do výplňových materiálů. Endo ReStart pracuje efektivně a kontrolovaně uvnitř kanálku.

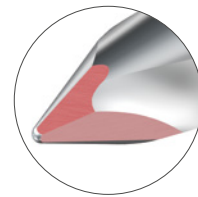


Rychlé ošetření.

Endo ReStart systém se vyrábí ve délkách 21 a 25 mm. Endo ReStart je rychlý a výkonný nástroj, což jej činí ideálním k pronikání do velmi tvrdých výplňových materiálů.



Dynamická spirála.


Speciálně přizpůsobený geometrický tvar ostří s dynamickým zkroucením dokonale pronikne do kořenové výplně, kterou poté jednoduše odstraní. Vzdálenost jednotlivých závitů instrumentu se zvětšuje směrem k pracovní části, což umožní optimální a kontrolované odvrtávání materiálu.

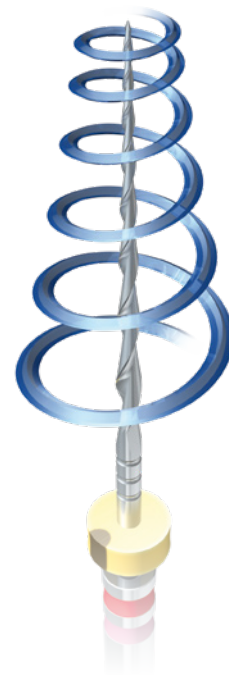

Krok za krokem.



1

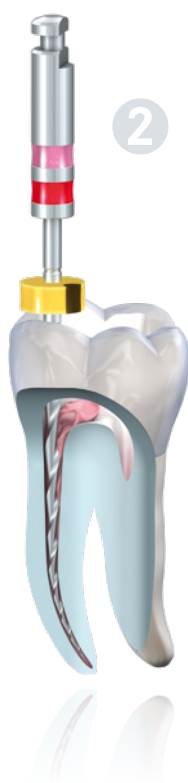

2

[01] Odstranění kořenové výplně v koronální třetině pomocí Endo ReStart Opener (RE10L15.204.030).

[02] Odstranění zbytku kořenové výplně pomocí Endo ReStart (RE05L21/25.204.025).

[03] Finální preparace.

Pomůcka: pro tento účel použijte: F6 Sky Typer




3

 300 rpm
 Kroutivý moment: 1,8 Ncm





Endo ReStart: Nejrychlejší cesta k šetrné endo revizi.

Endo ReStart systém:

 **RE10L15.204.030** 030/10
Endo ReStart Pronikač
Délka: 15 mm


STERILE

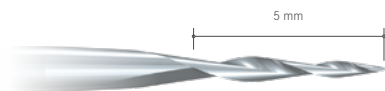


 **RE05L21.204.025** 025/05
Endo ReStart
Délka: 21 mm

STERILE



 **RE05L25.204.025** 025/05
Endo ReStart
Délka: 25 mm

STERILE

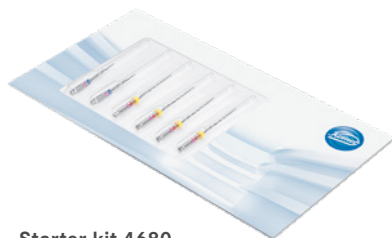

Starter kit 4680
2x Endo ReStart Pronikač
4x Endo ReStart
Délka: 25 mm



Dr. Giuseppe Squeo

Expert na endodoncii a původce myšlenky vývoje
Endo ReStart, Itálie

„Během své praxe jsem strávil většinu času prováděním endodontických zákroků. Minimálně 50% z těchto zákroků byla revizní ošetření kořenových kanálků. Díky tomu jsem neustále hledal nástroje, které by usnadnily mou práci. Které by byly schopny odstranit co největší množství kořenové výplně naráz.

Moje hledání je tímto u konce - díky Endo ReStart. Komet vyvinul nástroje se speciální aktivní špičkou, které jsou v tomto oboru jedinečné. Pronikají snadno i těmi nejtvrdějšími materiály. Tyto nástroje jsou velice flexibilní a bez problémů odstraňují staré výplně i v zakřivených kanálcích. Nástroje Endo ReStart se staly nepostradatelnou součástí mého profesního života.”

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Export:
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.de

