



## Abrasivi & Gommini | ETNA



Strumenti premium per perfezionisti.  
Realizzato per raggiungere l'eccellenza nella lavorazione della ceramica.

I restauri monolitici sono il gold standard dell'odontoiatria protesica, in cui sia l'aspetto naturale che le prestazioni del restauro sono determinati dalla sua forma e dalla qualità della superficie. Con la crescente diversità dei moderni materiali in ceramica integrale, le esigenze dei dentisti sono più elevate che mai e richiedono non solo precisione ma anche flessibilità nel trattamento. I nuovi abrasivi Komet ETNA e gli strumenti di lucidatura abbinati sono stati progettati per soddisfare queste richieste in particolare nei laboratori odontotecnici dove la perfezione è essenziale.

Gli abrasivi ETNA sono progettati per garantire durata, precisione ed efficienza. Sono caratterizzati da un legante più duro e da un'alta concentrazione di grani di diamante, da una migliore stabilità dei bordi e da un'eccellente asportazione del materiale. Questi strumenti preparano superfici che possono essere lucidate direttamente, eliminando la necessità di ulteriori fasi di lavoro.

Gli strumenti di lucidatura ETNA sono il complemento perfetto degli abrasivi, in quanto sono realizzati con un materiale più morbido e presentano una speciale granulometria diamantata che garantisce un lavoro fluido e senza sforzo. Consentono di ottenere una finitura brillante in soli due passaggi e offrono anche una durata eccezionale per prestazioni costanti nel tempo. Grazie alla loro versatilità, gli abrasivi e i gommini sono ideali per tutte le forme e dimensioni di ceramica, compreso l'ossido di zirconio.

Sia in laboratorio che in studio, ETNA offre ai professionisti strumenti di eccellenza, garantendo prestazioni ottimali. Affidatevi a Komet per avere soluzioni complete e di alta qualità che semplificano il vostro flusso di lavoro e forniscono risultati eccellenti.



### Vantaggi Abrasivi ETNA:

- Durata eccezionalmente lunga
- Efficace su tutti i tipi di ceramica, compreso l'ossido di zirconio
- Alta concentrazione di grani di diamante in uno speciale legante stabile
- Eccellente stabilità della forma e dei bordi
- Finitura superficiale fine, ideale per la successiva lucidatura

### Precauzioni di utilizzo:

-  opt. 10 000 - 12 000 giri al min.<sup>-1</sup>
- Procedere con poca pressione

### ETNA Abrasivi:

  
DCB1BA.104.025

  
DCB2BA.104.048

  
DCB3BA.104.040

  
DCB4BA.104.120

  
DCB5BA.104.220

  
DCB6BA.104.120

  
DCB7BA.104.220

  
DCB8BA.104.035


  
DCB9BA.104.050

  
DCB10BA.104.040

  
DCB11BA.104.060

  
DCB12BA.104.035

  
DCB13BA.104.150

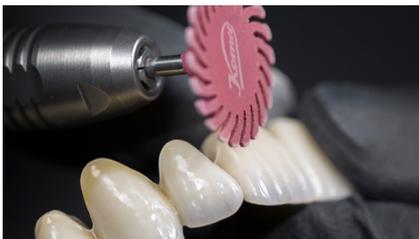

### Vantaggi Gommini ETNA:

- Grana di diamante speciale: produce una finitura superficiale impeccabile con una pressione minima.
- Perfetto per la lucidatura diretta dopo la lavorazione con gli abrasivi ETNA.
- Processo a due fasi: consente di ottenere una finitura brillante in due sole fasi.
- Materiale più morbido per una lucidatura senza sforzo.
- Applicazione flessibile: perfettamente adatta a vari restauri in ceramica.

### Precauzioni di utilizzo:

- 1. Fase: prelucidatura (rosso)
- 2. Fase: lucidatura a specchio (grigio)
-  opt. 6.000 giri al min.<sup>-1</sup>

### ETNA Gommini:

  
95001M.104.260

  
95001F.104.260

  
95002M.104.150

  
95002F.104.150

  
95003M.104.148

  
95003F.104.148

  
95004M.104.170

  
95004F.104.170

  
95005M.104.200

  
95005F.104.200

  
95006M.104.055

  
95006F.104.055