




Komet BioRepair:  
eine Lösung für 8 Indikationen

ANBIETERINFORMATION\*

# Komet BioRepair:

## Gebrauchsfertige Lösung zur Vitalitätserhaltung

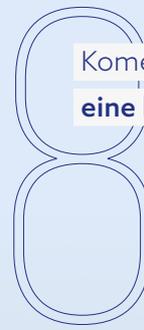

- Pulpotomie
- Wurzelresorption
- Apexifikation
- Apexogenese
- Überkappung
- Furkationsperforation
- Wurzelperforation
- Retrograde Füllung

### 1. All-in-one-Lösung

**Warum ist es so praktisch, mit Komet BioRepair eine gebrauchsfertige Lösung in Händen zu halten?**

Komet BioRepair ist bereits fertig gemischt, wenn es in der Zahnarztpraxis ankommt. Dadurch werden Mischfehler vermieden und die gebrauchsfertige Lösung spart Zeit und Kosten, weil unter anderem keine Mitarbeiterschulungen durchgeführt werden müssen.

**Wieviele Indikationen deckt Komet BioRepair ab?**

Komet BioRepair eignet sich ideal für die effektive Behandlung von **acht verschiedenen Indikationen**. Jede Indikation kann mit der gleichen Lösung durchgeführt werden! Dabei zeigt das biokeramische Putty hervorragende Eigenschaften zur Vitalitätserhaltung und Gewebestimulation.

### 2. Vorteile

**Welche zahnmedizinischen Besonderheiten sind bei Komet BioRepair hervorzuheben?**

Die All-in-one-Lösung bietet konstante Qualität, denn das vorgemischte Putty schließt Anwenderfehler aus und ermöglicht dem Behandler, in konstant hoher Komet-Qualität zu performen. Darüber hinaus hemmt Komet BioRepair das bakterielle Wachstum. Die bakterizide Wirkung durch den starken alkalischen pH-Wert von ~12 hilft, Frühinfektionen zu verhindern – eine Eigenschaft, die durch die Verwendung eines Materials, das während des Aushärtungsprozesses nicht schrumpft, weiter verbessert wird und keinen Raum für bakterielles Eindringen lässt.

**Weshalb lernt der Behandler das neue Putty außerdem zu schätzen?**

Komet BioRepair besticht durch seine biokeramische Formel aus Kalziumsilikaten ohne Zusatz von Schwermetallen. Dadurch induziert das Material die Neubildung von periradikulärem Zement und stimuliert den Reparaturprozess in geschä-



digten periradikulären Geweben. Das ermöglicht Zahnärzten, Behandlungen durchzuführen, die zuvor undenkbar waren. Das Putty ist außerdem hydrophil, das heißt das Material benötigt Feuchtigkeit, um den Aushärtungsprozess zu starten. Dies reduziert den Stress für den Behandler maßgeblich, da die Kavität vor der Anwendung nicht vollständig getrocknet werden muss. Und schließlich ist das Material dank der hohen Radiopazität auf Röntgenbildern leicht zu erkennen. Dies erleichtert die Kontrolle.

**Welche Materialeigenschaften von Komet BioRepair werden den Patienten freuen?**

Patienten werden es schätzen, dass sich mit Komet BioRepair die Langzeitprognose ihrer endodontischen Behandlung verbessert. Dank der vitalitätserhaltenden Eigenschaften eröffnet das Putty neue Behandlungsmöglichkeiten auch für anspruchsvolle Indikationen. Das betrifft übrigens auch die Ästhetik: Die Inhaltsstoffe von BioRepair verursachen keine Verfärbungen mehr. Somit ist Komet BioRepair die neue, zukunftsweisende Lösung für insgesamt acht endodontische Behandlungen.



Infos zum Unternehmen

\* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.